

Gel Noppenplatten

Unsere Gel Noppenplatten aus weichem, elastischem Synergel sorgen für eine komfortable und gleichmäßige Druckverteilung. Das Gel ist den physikalischen Eigenschaften des menschlichen Gewebes angepasst. Die Charakteristik dieses Gels ist temperaturunabhängig.

Für Maßanfertigungen können die völlig geruchlosen und hypoallergenen Noppenplatten individuell zugeschnitten werden. Das pflegeleichte Gel bleibt formstabil und fließt nicht. Der Klebeeffekt, der beim Schneiden entsteht, kann durch Auftragen von Talkumpuder oder Babypuder aufgehoben werden.

Die Noppenstruktur sorgt für einen Luftaustausch an der Oberfläche und eine faltenfreie Anpassung an eventuelle Rundungen und Körperstrukturen.

Dazu passende Bezüge sind auf Anfrage erhältlich.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße
D 2 1 100=1414	Gel Noppenplatte	36 x 36 cm
D 2 1 100=1616	Gel Noppenplatte	40 x 40 cm
D 2 1 100=2020	Gel Noppenplatte	50 x 50 cm
D 2 1 100=2420	Gel Noppenplatte	61 x 50 cm


Gel Armlehnen

Unsere Gel Armlehnen, die auf einen kunststoffummantelten Holzkern aufgebaut sind, können direkt, oder auch mit dem Schienensystem (Artikel Nr.: D 2 2 010=215 / D 2 2 010=300) montiert werden.

Die Füllung der Armlehnenpolster besteht aus weichem Synergel, welches eine optimale Druckentlastung bietet. Die Armlehnen sind problemlos direkt mit den meisten McLean Armlehnenträgern adaptierbar.


Diese Armlehnen können auch für andere Zwecke eingesetzt werden, u.a. als Wadenplatte.

Die Gel Armlehnen sind in fünf verschiedenen Größen lieferbar.

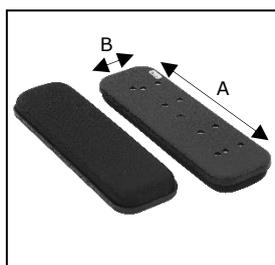

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße
D 2 2 100=1	Gel Armlehne	A= 30 x B= 9 cm
D 2 2 100=2	Gel Armlehne	A= 36 x B= 9 cm
D 2 2 200=0	Gel Armlehne, schmal	A= 26 x B= 5 cm
D 2 2 200=1	Gel Armlehne, schmal	A= 30 x B= 5 cm
D 2 2 200=2	Gel Armlehne, schmal	A= 36 x B= 5 cm

Montageschiene für Armlehnen

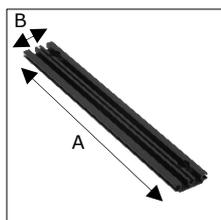

Dieses Schienensystem bietet eine Vielzahl von Verstellmöglichkeiten, sowohl von vorne nach hinten, als auch im Winkel. Sie ist bei Bedarf um einige Grad nach innen und außen schwenkbar.

D 2 2 010=215	
A=	21,5 cm
B=	cm
D 2 2 010=300	
A=	30,0 cm
B=	cm

Gel Kniepolster




- Seitliche Gel Polster als Knieschutz
- inkl. abklappbaren Bügeln für Beinstützen mit 22 / 25 mm Durchmesser

D 2 3 100	
Ø=	100 mm
Schraubenverbindung	
D 2 3 200	
Ø=	100 mm
wegklappbar	

Gel Schutzhüllen

Die Schutzhüllen können an fast allen gängigen Rollstühlen mittels Klettverschlusses angebracht werden. Es gibt eine linke und eine rechte Ausführung, die an der jeweiligen Körperseite mit zusätzlicher Synergelfüllung gepolstert ist. Die einfache Montage dieser Schutzhüllen ist auf unterschiedliche Rohrdurchmesser durch den Klettverschluss individuell anpassbar.

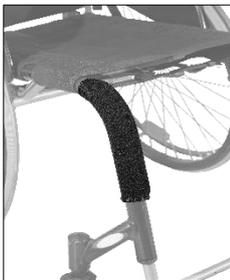

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße
D 2 3 300	Gel Beinschutzhülle mit Klettverschluss	24 cm
D 2 3 400	Gel Beinschutzhülle für Beinbügel	14 cm



Gel Klebepolster

Die aufklebbaren Polster sind mittels Klebestreifen leicht auf allen trockenen und sauberen Oberflächen anzubringen. Sie dienen zum Schutz gegen Stöße, Druckstellen und Schürfwunden. Alle Gelpolster dienen der Druckentlastung. Die Klebepolster sind optimal zur punktuellen Entlastung auf Therapietischen oder z. B. in Standard Rollstühlen einsetzbar. Die Gel Klebepolster sind aus elastischem Synergel gefertigt. Bei Beschädigung der Außenhülle kann daher kein Gel austreten.

Die Artikel können mit milder Seife, Schwamm und warmem Wasser gereinigt werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße
D 2 4 100=1	Gel Klebepolster, oval	80 x 100 mm




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße
D 2 4 100=2	Gel Klebepolster, oval	100 x 200 mm
D 2 4 100=3	Gel Klebepolster, oval	120 x 300 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße
D 2 4 200=1	Gel Klebepolster, flach	40 x 190 mm
D 2 4 200=2	Gel Klebepolster, flach	50 x 190 mm

Gel Wadenpolster

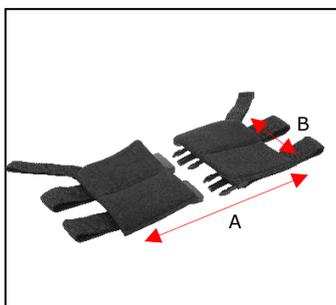


- Gel Wadenpolster mit Steckschlössern zum Öffnen, klettbar und verstellbaren Gurten
- in zwei Größen lieferbar
- Die Polster sind an sämtlichen Rollstuhlbreiten durch Klett u. Flausch individuell anpassbar
- Optimal auch für alle Standard Rollstühle

D 2 3 600=1	
A=	24,0 cm
B=	16,0 cm
verstellbar	26 - 40 cm

D 2 3 600=2	
A=	40,0 cm
B=	19,0 cm
verstellbar	40 - 50 cm

Gel Rohrpolster

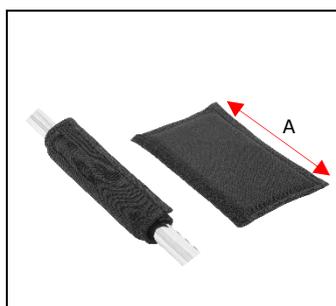

- Gel Rohrpolster, klettbar
- in zwei Größen lieferbar
- einsetzbar für Rohrdurchmesser von 20 bis 25 mm

D 2 3 310=150	
A=	15,0 cm

D 2 3 310=200	
A=	20,0 cm